

ROOT Q for Trauma
Ver1.1
インストールマニュアル

初版

2013年8月

特定非営利活動法人(NPO) ヘルスサービスR&Dセンター(CHORD-J)

改版履歴

版数	発行日	備考
初版	2012/5/15	
第2版	2013/8/26	Ver1.1 対応

参照ドキュメント

- ROOT Q for Trauma 操作マニュアル

目次

1 はじめに	3
1.1 表記規則	3
2 インストール要件.....	3
2.1 ハードウェア要件	3
2.2 OS 要件.....	3
2.3 システムドライブのファイルシステム要件	4
2.4 ネットワーク要件	4
2.5 旧バージョンからのバージョンアップ	4
2.6 PostgreSQL について.....	4
2.7 コンピュータへのログインユーザの権限	4
3 インストールの準備.....	4
3.1 準備.....	4
3.2 インストール所要時間.....	6
4 インストール手順.....	6
4.1 インストール手順.....	7
5 システムのアンインストール方法.....	14

1はじめに

本書は、「ROOT Q for Trauma Ver 1.1」(以下本システムといいます)のインストール方法を説明するものです。

1.1表記規則

規則	意味
「大メニュー」 「小メニュー」	メニューの名称を表します。メニューの大項目と小項目の間は、縦線で区切って表します。
□	大カッコ内は、画面やダイアログボックスに表示される文字、またはキーボードのキーを表します。
<>	山カッコ内は、ユーザが入力する内容を表します。
→	操作したあとの結果を表します。
 注意	ご使用となるうえでの注意事項を表します。
 参照	ほかのマニュアルやヘルプの参照先を表します。

2 インストール要件

ここでは、本システムをインストールするための要件を説明します。

2.1 ハードウェア要件

現在、販売されているパーソナルコンピュータであればほぼ動作可能です。

本システムをインストールする上で最低限必要なハードウェア要件は下記の通りです。

- ハードディスク空き容量 5 GB 以上
- メモリ 1GB 以上
- 画面解像度: 1024 x 768 以上

2.2 OS 要件

本システムは、以下のOSがインストールされたコンピュータ上で動作します。

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows XP SP1 以降
- Microsoft Windows 2008 Server R2
- Microsoft Windows 2008 Server
- Microsoft Windows 2003 Server

2.3 システムドライブのファイルシステム要件

システムドライブ(通常はCドライブ)のファイルシステムがNTFSであることが必要です。インストーラが自動チェックしますので、事前のご確認は必要ありません。

2.4 ネットワーク要件

JTDB サーバと通信するためには、インターネットに接続可能であることが必要です。

2.5 旧バージョンからのバージョンアップ

本システムの旧バージョン(βバージョン Ver0.9)がインストールされているコンピュータに、本システムをインストールすると、システムのバージョンアップが行われます。旧バージョンに登録した患者情報はバージョンアップ後もそのまま有効です。

2.6 PostgreSQL について

汎用データベースソフト PostgreSQL が、(他の用途で)既にインストールされているコンピュータにはインストールできません。

インストーラが自動チェックしますので、事前のご確認は必要ありません。

もし該当する場合、PostgreSQL のアンインストールをいただくか、または別コンピュータへのインストールをご検討ください。

2.7 コンピュータへのログインユーザの権限

コンピュータへ管理者権限でログインしていることが必要です。

確認方法は、3.1(4)項をご参照ください。


3 インストールの準備

3.1 準備

- (1) 本システムのインストーラファイル(Setup.exe)をお手元にご準備ください。
- (2) コンピュータ上の他のアプリケーションは終了させてください。
- (3) ウイルス対策ソフト等のセキュリティ用ソフトが起動していると、インストールが失敗する場合があります。インストールの間だけセキュリティソフトを終了してください。
- (4) コンピュータへ管理者権限を持ったユーザでログインしてください。ログインユーザの権限は、以下の手順で確認が出来ます。


●WindowsXP、または、Windows2003Server の場合

- ・「スタート」|「コントロールパネル」|「ユーザアカウント」を選択します。
- ・以下の画面が表示されます。現在ログインしているユーザ名の下欄に「コンピュータの管理者」と表示されていることを確認します。(画面はサンプルです)

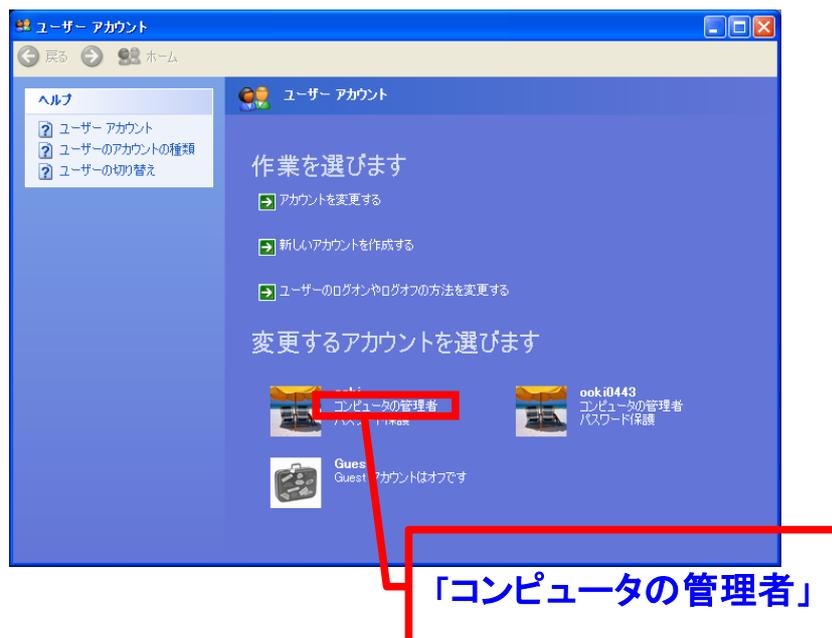


●Windows Vista または Windws 2008 Server の場合

- ・「スタート」|「設定」|「コントロールパネル」|「ユーザアカウント」を選択します。
- ・以下の画面が表示されます。現在ログインしているユーザの[グループ]欄に「Administrator」と表示されていることを確認します。(画面はサンプルです)

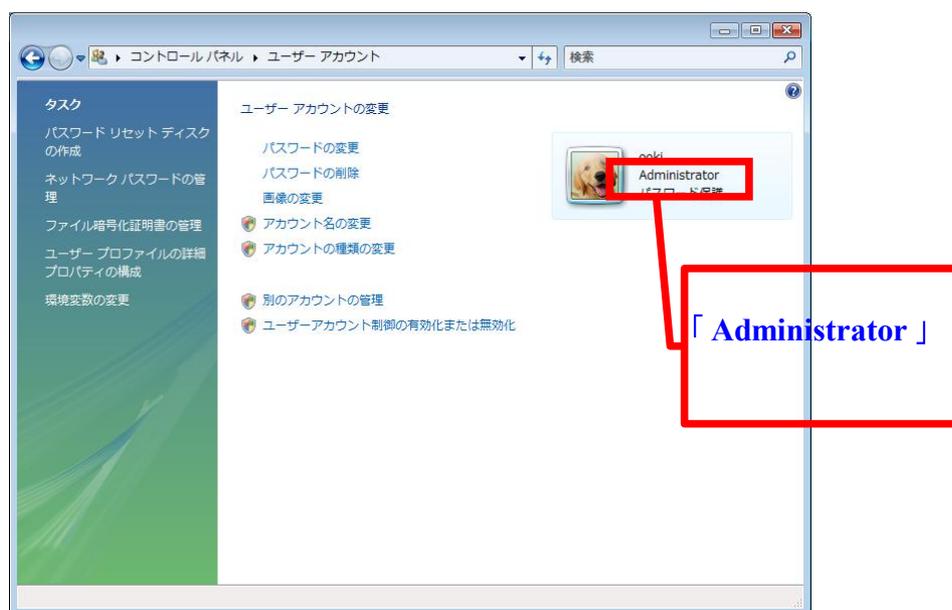

●Windows 7 または Windows 2008 Server R2 の場合

- ・「スタート」|「設定」|「コントロールパネル」|「ユーザーアカウント」を選択します。
- ・以下の画面が表示されます。現在ログインしているユーザの[グループ]欄に「Administrator」と表示されていることを確認します。(画面はサンプルです)

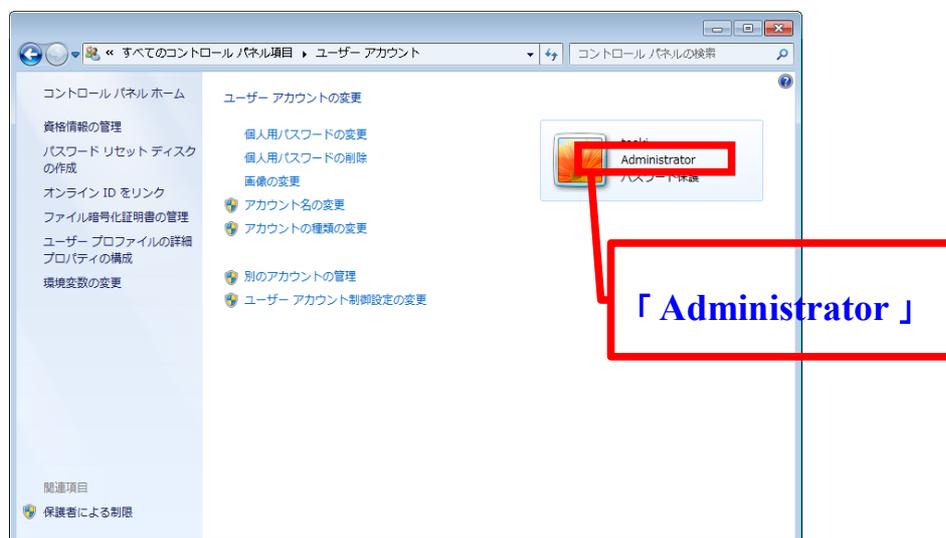

3.2インストール所要時間

インストールには、10～20 分程度の時間を要します。

4インストール手順

ここでは、本システムのインストール手順を説明します。

インストーラにより以下の順番にインストールが行われます。

- ・Microsoft .NET Framework 2.0 (*1)
- ・Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack (*1)
- ・PostgreSQL8.2.3
- ・ROOT Q for Trauma アプリケーション

(*1) Microsoft .NET Framework 2.0、Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack は、ご利用のコンピ

ユ

ュータの OS が Windows Xp または 2003 Server であり、Microsoft .NET Framework2.0 がインストールされていない場合に、本インストーラによりインストールされます。

(Windows Vista、7、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2 の場合は、上位バージョンの.NET Framework が OS の初期状態でインストール済みため、Microsoft .NET Framework 2.0 はインストールされませんが問題はありません)


4.1インストール手順

(1) 本システムの下記のインストーラーファイルを実行します。
Setup.exe

(2) [次へ] を押します。



(3) 使用許諾契約書の内容をご確認いただき、<使用許諾契約の全条項に同意します>を選択し、[次へ]を押します。

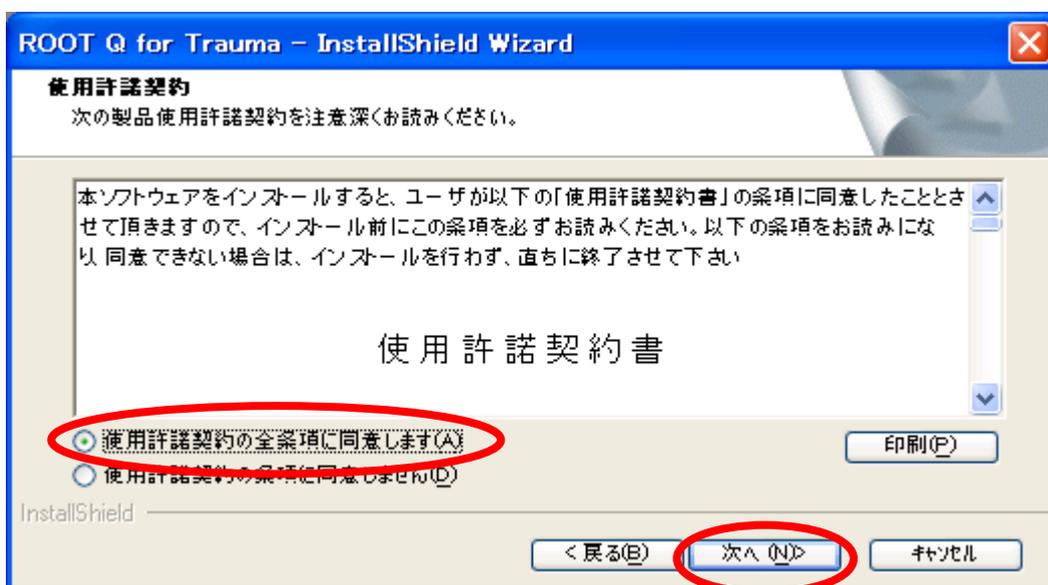


この後、ご利用のコンピュータに Microsoft .Net Framework2.0 が既にインストールされている場合、(7)または(10)に進みます。


Microsoft .Net Framework2.0 がインストールされていない場合、(4)に進みます。

(4) Microsoft .Net Framework2.0 のインストールを開始します。

[次へ]を押します。

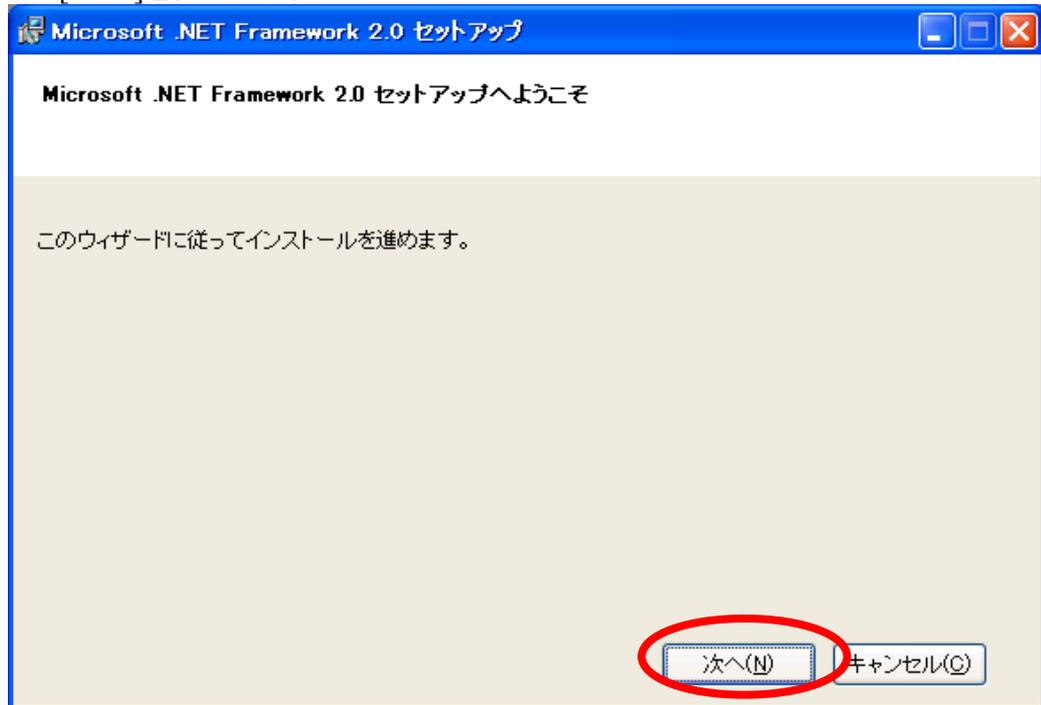


(5) [同意する]を選択し、[インストール]を押します。

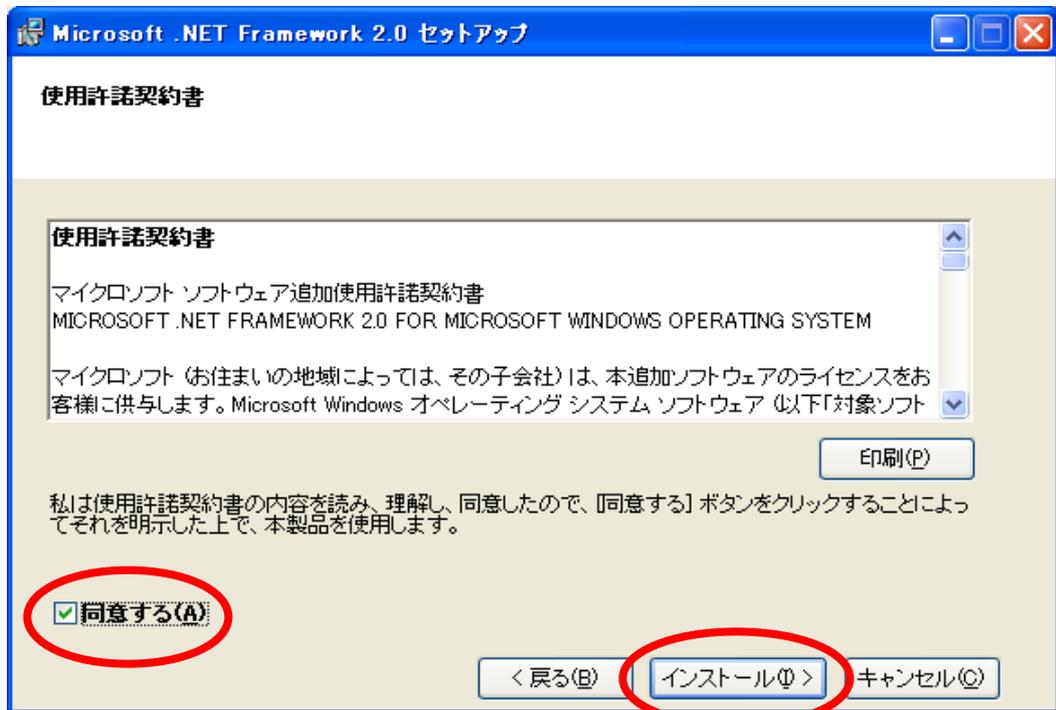

→これにより Microsoft .Net Framework2.0 のインストールが開始します。
処理は数分掛かりますので暫くお待ちください。


- (6) Microsoft .Net Framework2.0 のインストールが終了すると、次の画面が表示されます

[完了]を押します。

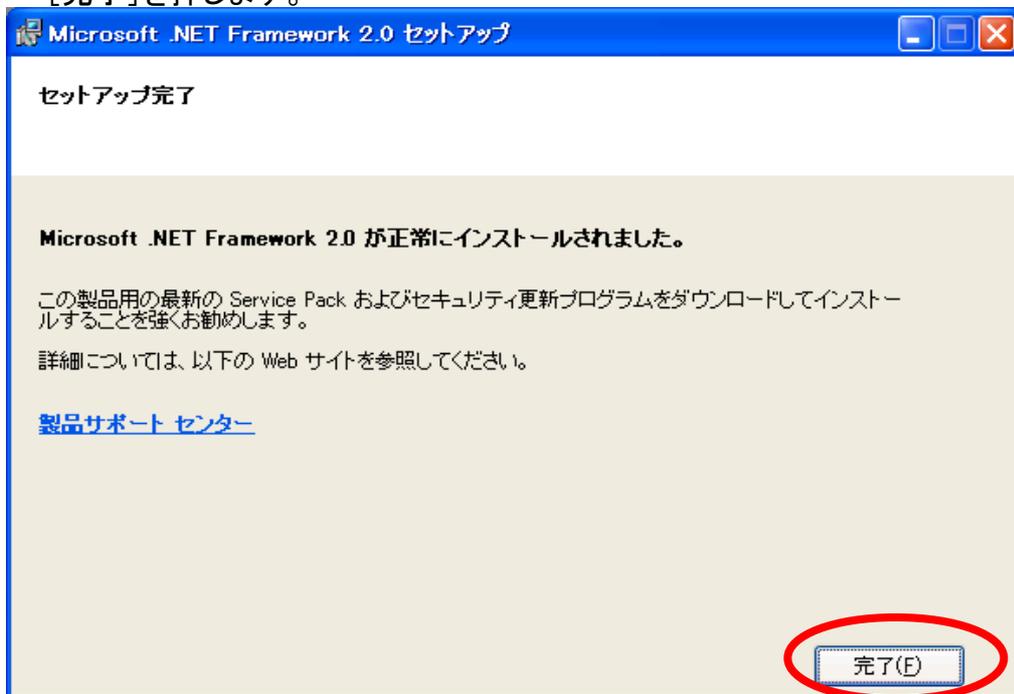


- (7) Microsoft .NET Framework2.0 日本語 Language Pack のインストール
※ご利用のコンピュータに Microsoft .Net Framework2.0 日本語 Language Pack がインストールされていない場合、この画面が表示されます。

[次へ]を押します。

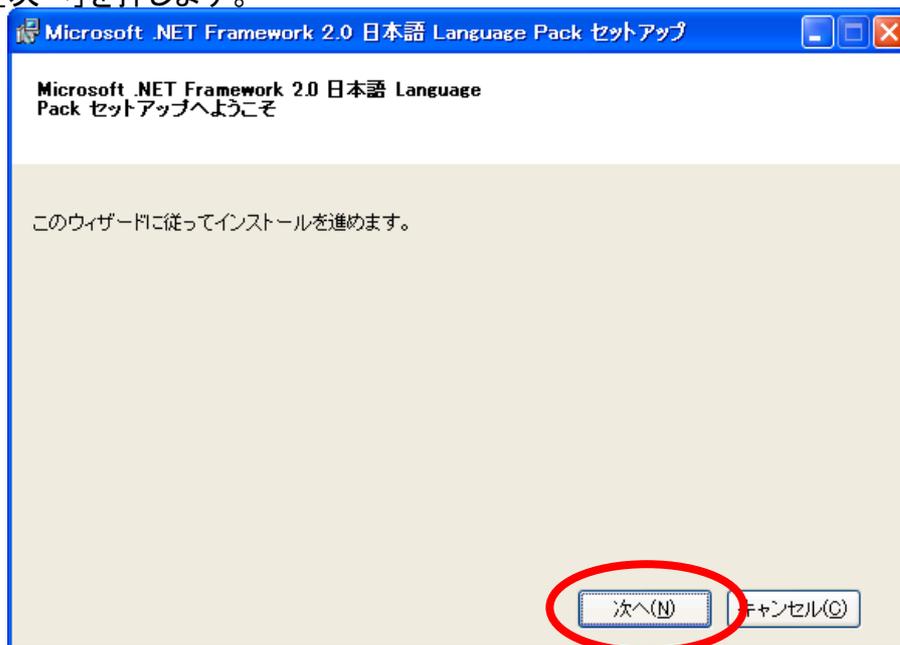


(8) [同意する]にチェックを入れ、[インストール]を押します。

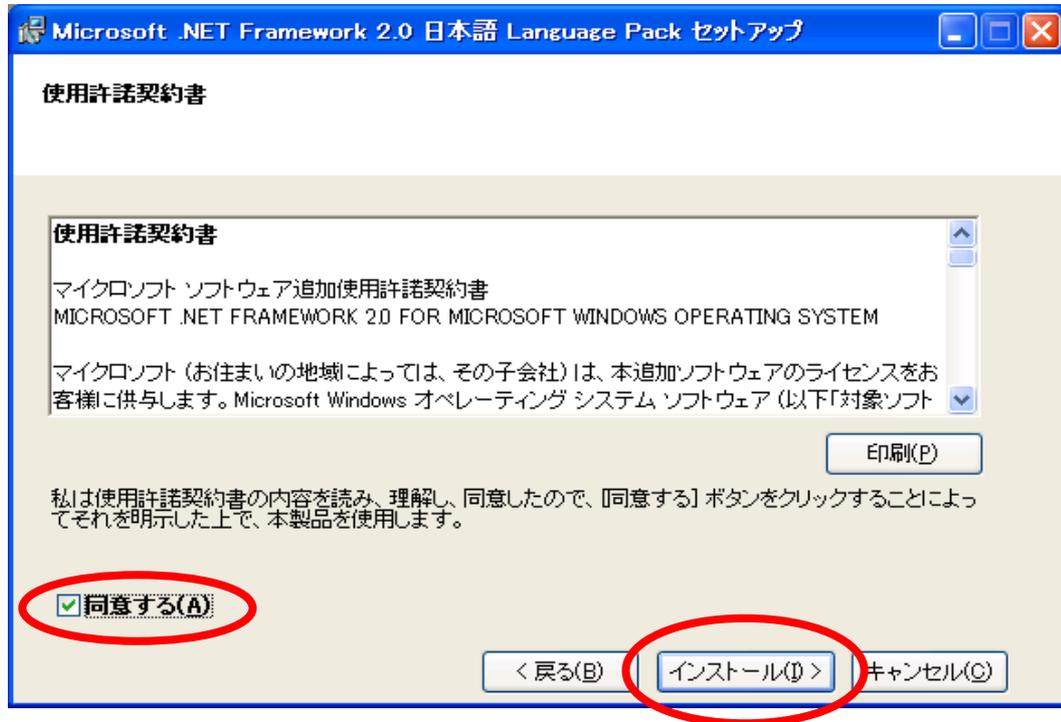

→これにより、Microsoft .Net Framework2.0 日本語 Language Pack のインストールが開始します。


(9) Microsoft .Net Framework2.0 日本語 Language Pack のインストールが終了すると、次の画面が表示されます。

[完了]を押します。

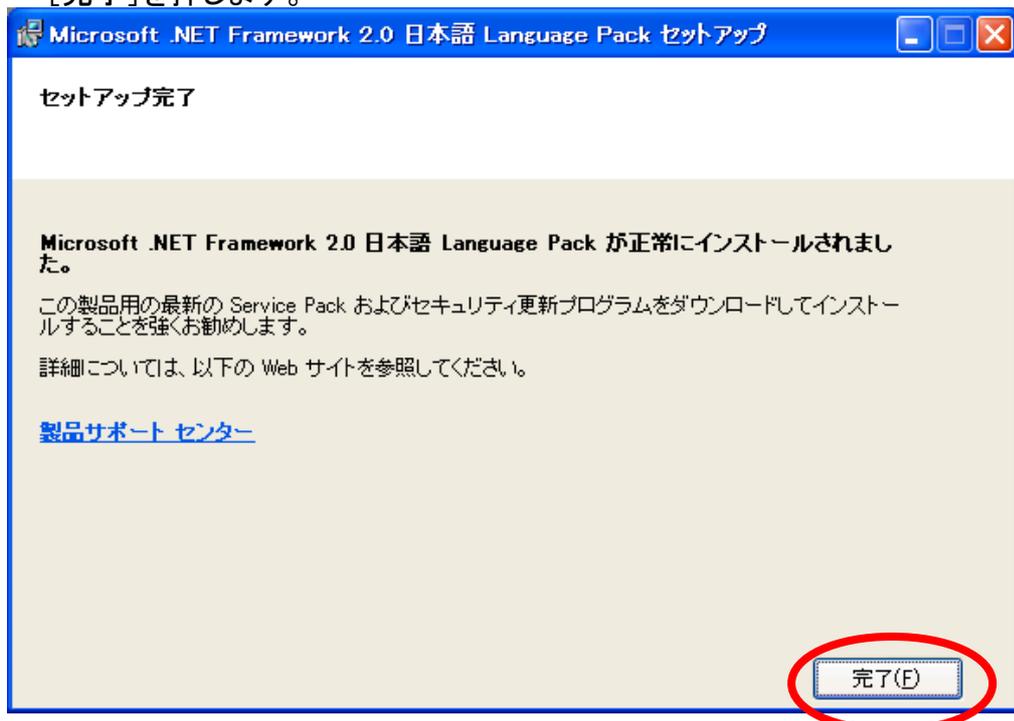


(10)ROOT Q for Trauma の旧バージョンがインストールされている場合、次の画面が表示されます。

[はい]を押します。

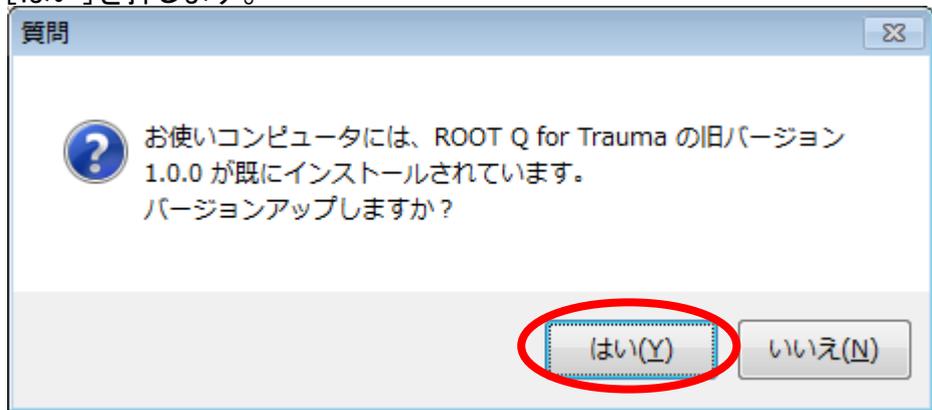

(11)PostgreSQL のインストールを開始します。この処理は数分掛かります。暫くお待ちください。

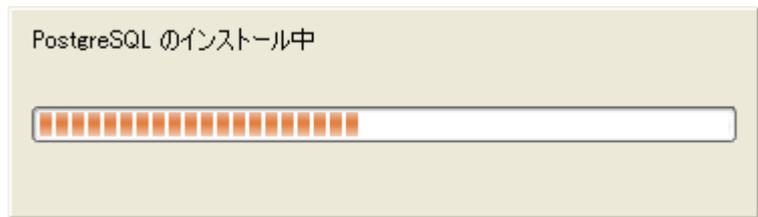


(12)ROOT Q for Trauma アプリケーションのインストール

[次へ]を押します。




(13)[次へ]を押します。

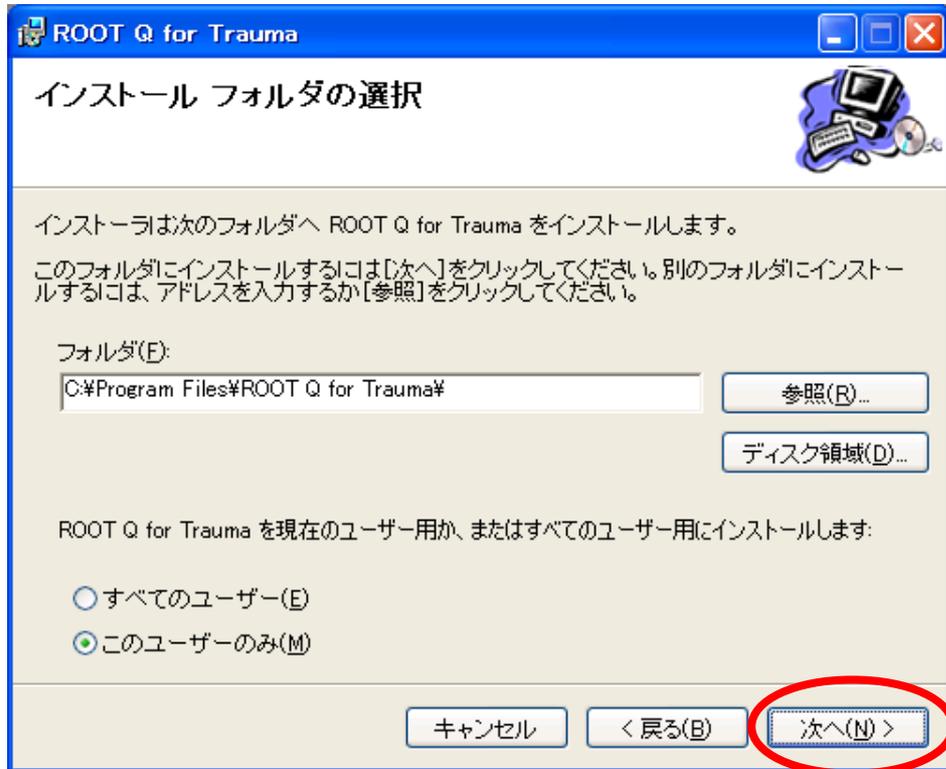


※フォルダ及びユーザは、変更の必要はありません。

(14)[次へ]を押します。

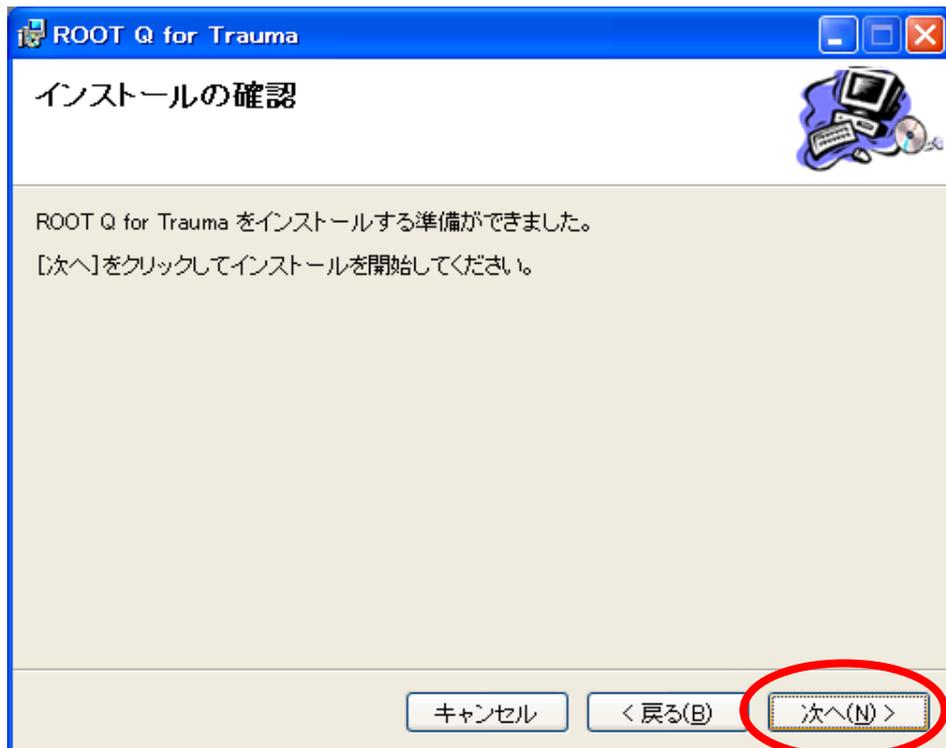


(15)アプリケーションのインストールが終了すると次の画面が表示されます。

[閉じる]を押します。

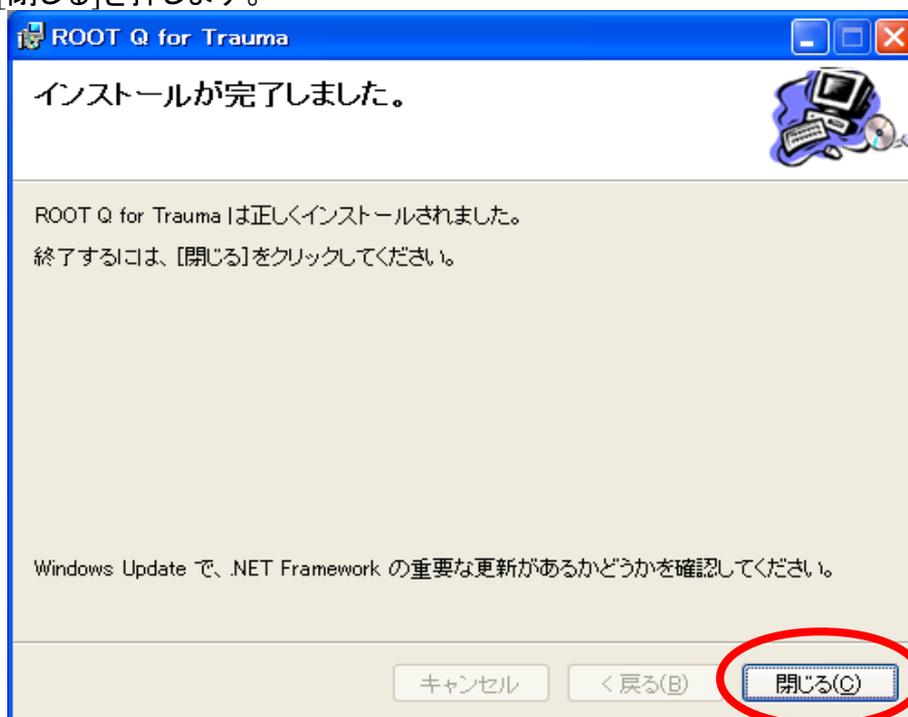

(16)完了を押します。

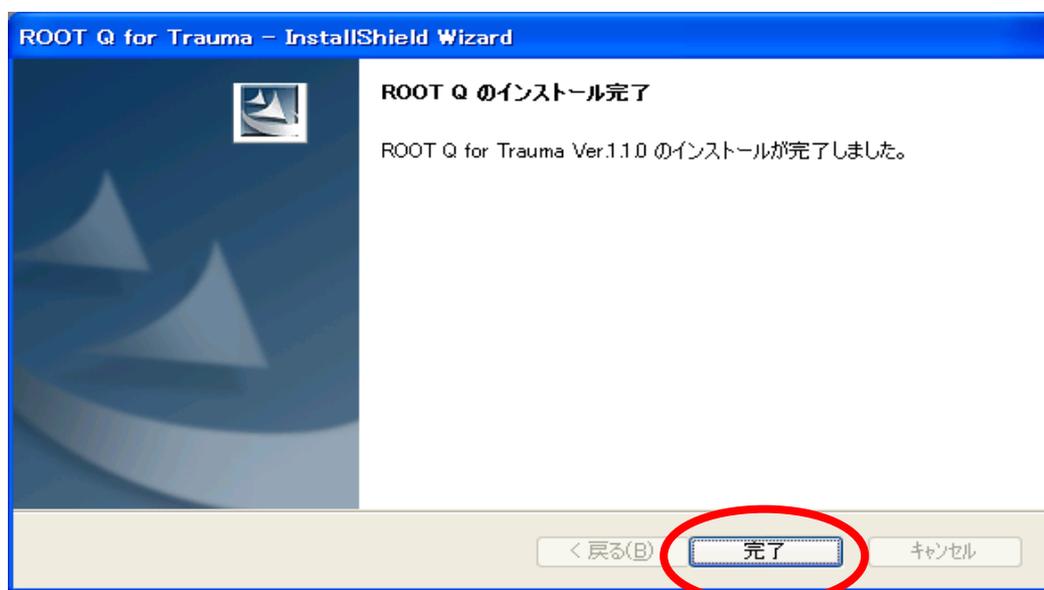

以上で、本システムのインストールは完了です。

5 システムのアンインストール方法

- (1) 患者データを全て削除します。

患者データを完全に削除するには、ROOT Q for Trauma を起動し、メニューから「オプション」-「動作環境設定」を選択します。[データ全件削除]画面が表示されますので、同画面の「削除実行」ボタンを押します。



注意 プログラムをアンインストールをしただけでは、患者データは削除されません。システムをアンインストールする際には、本手順を必ず実施してください。

- (2) 現在インストールされているプログラムの一覧を表示します。

プログラム一覧を表示するには下記のメニュー選択をします。

- ・XP,2003Server の場合:「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムの追加と削除」
- ・Vista,Windows7,Windows2008 Server の場合:「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムと機能」

- (3) 現在インストールされているプログラムの一覧から、下記のプログラムを削除します。

- ・ROOT Q for Trauma

※下記のプログラムについては、本システム以外のアプリケーションでも使用されている可能性がありますので、ご利用のコンピュータの状況に応じ、アンインストールをしてください。

- ・PostgreSQL 8.2
- ・Microsoft .Net Framework 2.0
- ・Microsoft .Net Framework 2.0 日本語 Language Pack

以上